


Programma di screening dell'NHS contro il cancro dell'intestino



Questo volantino spiega come usare il kit.
Si raccomanda di leggere con attenzione.

Nel kit troverete:

- ☒ una busta preaffrancata per la spedizione,
- ☒ 6 stick in cartoncino,
- ☒ un kit in cartoncino per il test, di colore bianco ed arancione.

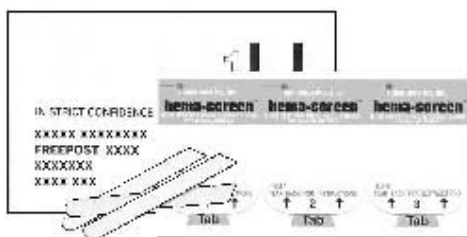

Importante:

Se chiuso, il kit ha una validità di diversi mesi, ma deve essere utilizzato e pervenire al laboratorio per analisi **entro 14 giorni** da quando è stato preso il primo campione.

Si prega di notare che non si eseguono analisi durante i week-end.

1. Prima del test

Prima di sedersi sul water preparare il kit per l'uso: estrarlo dalla busta e tenere a portata di mano i due stick in cartoncino.



Lasciare sigillato il lato con scritto "DO NOT OPEN" (non aprire), così da assicurare che i risultati non vengano compromessi.




Il kit contiene 3 parti, per 3 evacuazioni separate.

Aprire solamente un'aletta alla volta.
Non separare le tre parti.

2. Il test


Sul lato **con stampato il vostro nome**, scrivere la data nello spazio previsto sull'aletta 1.

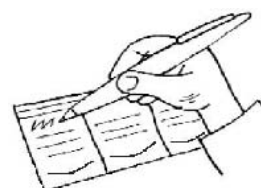

- Sollevare l'aletta 1.
- Vi sono due "finestrelle" su cui applicare i campioni.
- Tenere il kit e gli stick a portata di mano.

3. Raccolta del primo campione

- È importante che le feci da cui prendere il campione non vengano a contatto con la tazza del water poiché ciò potrebbe compromettere il risultato del test. Il campione può essere raccolto:
 - con della carta igienica piegata,
 - con la mano protetta da un sacchetto di plastica,
 - da un contenitore pulito "usa e getta".
- Con lo stick in cartoncino raccogliere un piccolo campione delle feci e spalmarlo leggermente sulla prima finestrella.

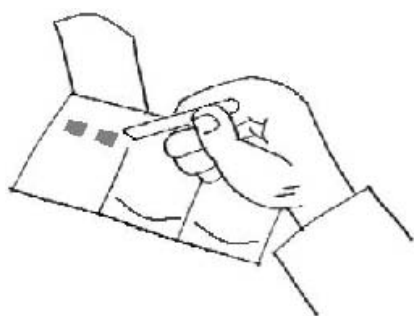

- Con un secondo stick raccogliere un altro campione da una parte diversa della stessa evacuazione e spalmarlo nello stesso modo sulla seconda finestrella.

4. Al termine

- Pulire gli stick con della carta igienica, avvolgerli e gettarli in un bidone delle immondizie esterno. **Non gettare** gli stick in cartoncino nel gabinetto.
- Chiudere l'aletta e ripiegarla sotto la linguetta arancione, così da sigillarla in modo sicuro.
- **Non** lasciare il kit in un ambiente caldo o esposto alla luce del sole, perché potrebbe deteriorarsi. Dopo l'uso lavarsi le mani.

5. Raccolta del secondo campione

- Scrivere la data sull'aletta 2.
- Ripetere il test utilizzando le due finestrelle sotto l'aletta 2.

6. Raccolta del terzo campione

- Scrivere la data sull'aletta 3.

- Ripetere il test utilizzando le due finestrelle sotto l'aletta 3.

Nota: I campioni devono essere raccolti da tre evacuazioni separate, non necessariamente successive.

Lista di controllo

Avete spalmato i campioni su tutte e sei le finestrelle?

Avete scritto la data su tutte e tre le alette?

Il kit perverrà al laboratorio di analisi entro **14 giorni** dalla data in cui è stato preso il primo campione?

Se la risposta ad una di queste domande è NO, consultare il centro responsabile del programma contattando telefonicamente il numero verde (Freephone) 0800 707 60 60.

Se la risposta a tutte le domande è SÌ, inserire il kit nella busta preaffrancata e preindirizzata ed inviare a mezzo postale. La busta è conforme alle norme dei servizi postali e la sua spedizione è sicura, accertarsi tuttavia che sia pulita per proteggere gli addetti postali.

Avete delle domande?

Rivolgetevi al centro responsabile del programma al **NUMERO VERDE (FREEPHONE) 0800 707 60 60**

Le telefonate vengono trattate con la massima riservatezza. Chiedete informazioni o consulenza senza alcun imbarazzo: il personale è a disposizione per aiutarvi.



Ricordare:

Conservare il kit lontano da fonti di calore e non esporlo alla luce del sole.